



POUSSEUR 2.1

LIGHT ASSIST 2.1


NOTICE D'UTILISATION




Mars 2024



1 METTEZ EN PLACE LA MOTORISATION

Votre fauteuil a été équipé de *profilés fixes ou amovibles** et de *crochets* qui permettront l'installation très rapide de votre motorisation.


1. Actionnez les freins du fauteuil pour faciliter le montage.
2. Dirigez vers l'arrière les deux manettes d'embrayage (position neutre). Si besoin, tirez le bouton d'embrayage noir. 
3. Posez le moteur sur les crochets à l'aide de la poignée supérieure en positionnant les axes gris sur les crochets gris.
4. Vérifiez que les axes soient bien en place dans les crochets.

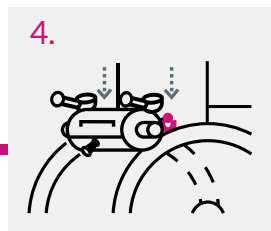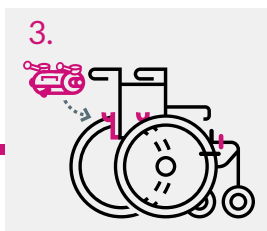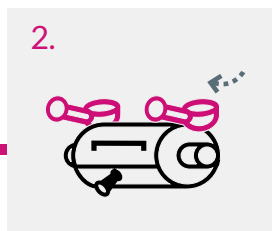

*pour les fauteuils confort


2 TOURNEZ LES MANETTES POUR EMBRAYER

1. Tirez chaque poignée télescopique pour avoir plus de force.
2. Embrayez les deux manettes en commençant toujours par le côté droit.

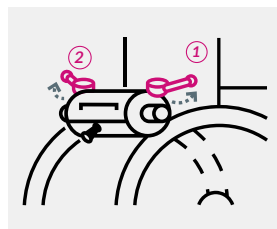

LE +

Vous pouvez débrayer la motorisation en un mouvement et retrouver ainsi l'usage classique du fauteuil roulant manuel.


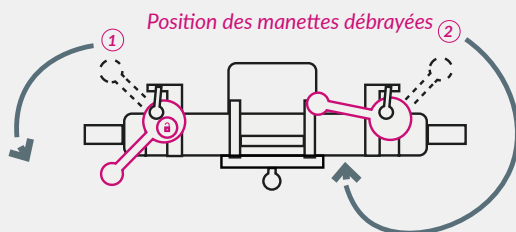


- ① Tirez la poignée gauche puis la tourner dans le sens anti-horaire jusqu'à la butée.
- ② Tirez la poignée droite puis la tourner dans le sens horaire jusqu'au dossier du fauteuil.

3 POSITIONNEZ LES POIGNÉES DE COMMANDE

Des **supports** ont été installés sur les poignées du fauteuil pour la mise en place des poignées de commande.

Deux ou trois* poignées sont fournies avec la motorisation :

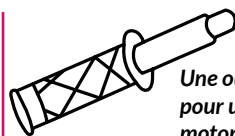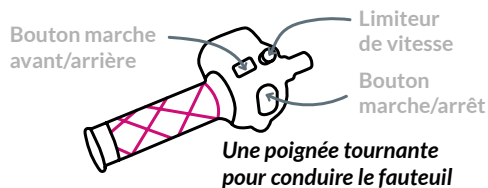



Une ou deux* poignées fixes pour utiliser le fauteuil sans la motorisation ou équilibrer les bras de l'accompagnant avec la poignée tournante

*pour les fauteuils confort

Les poignées se positionnent à droite ou à gauche sur les poignées arrière du fauteuil.

4 METTEZ EN PLACE LA BATTERIE


1. Prenez le rack batterie et posez le profilé supérieur sur les glissières.
2. Poussez le rack assez fermement jusqu'à entendre le bruit des connecteurs qui s'enclenchent.

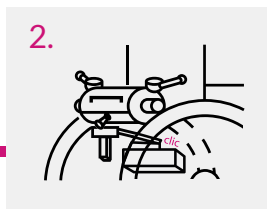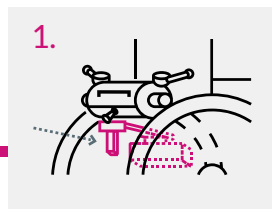

5 POSITIONNEZ L'ANTI-BASCULE

Introduisez l'anti-bascule de sécurité dans la poignée arrière de la motorisation (roulette dirigée vers le bas).

Votre motorisation est prête à être utilisée !

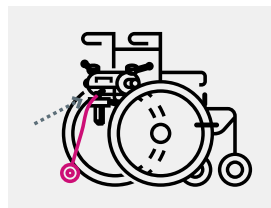

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

Pour assurer une bonne utilisation et longévité de votre motorisation, voici quelques conseils à suivre :



Chargez votre batterie après chaque journée d'utilisation et pendant les périodes d'inutilisation.



Gonflez régulièrement vos pneus à 8 bars pour un fonctionnement optimal.






Nettoyez régulièrement les galets (gauche et droite) de la motorisation.

Suivez **notre chaîne Youtube** pour recevoir régulièrement des conseils.


6 RETIREZ LA MOTORISATION

1. Actionnez les freins sur le fauteuil pour faciliter le démontage.
2. Laissez les poignées embrayées sur le fauteuil
3. Retirez l'anti-bascule et accrochez-le à l'emplacement prévu sur la batterie.
4. Déverrouillez le rack batterie à l'aide du verrouillage de rack et tirez-la vers l'arrière.
5. Retirez les 2 poignées de commande et rangez-les à l'emplacement prévu à l'arrière de la motorisation.
6. Mettez les manettes en position neutre (tirez sur le bouton noir).
7. Soulevez la motorisation à l'aide de la poignée supérieure. Les axes doivent sortir des crochets.

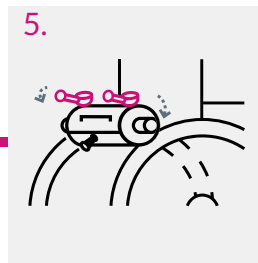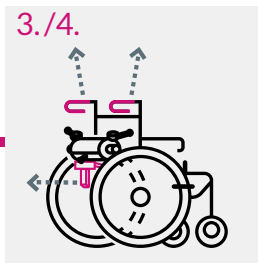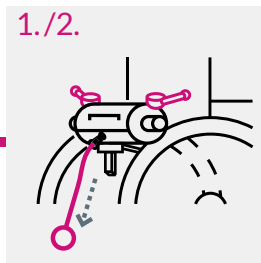

7 RECHARGEZ LA BATTERIE

Raccordez les 2 connecteurs rouges de la batterie et du chargeur ensemble puis branchez le chargeur sur le secteur. Déconnectez une fois la charge complète.

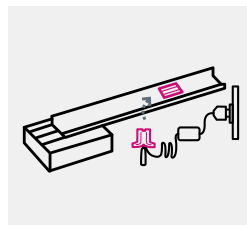

CONSEILS D'UTILISATION

Dans les lieux confinés, 2 possibilités :

1. Débrayez la motorisation et utilisez le fauteuil en mode manuel.
2. Utilisez le limiteur de vitesse pour bloquer la motorisation à une vitesse très faible et conduisez le fauteuil à l'aide de la poignée tournante.

À l'approche d'un trottoir :

Ne pas s'arrêter devant la marche et ne pas essayer de soulever le fauteuil !
Approchez lentement du trottoir, basculez le fauteuil (les roues avant sur le trottoir) et continuez à avancer.

CARNET D'ENTRETIEN À CONSULTER

pour les consignes de conduite, de sécurité et d'entretien

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. En sa qualité de fabricant, BENOIT SYSTEMES déclare que ce produit est un dispositif de classe I, conforme aux exigences de sécurité et de performance du Règlement européen 2017/745/CEE relatif aux dispositifs médicaux.

📍 7 Rue du Pont, 21450 Billy-Lès-Chanceaux FRANCE
☎ (+33) 3 80 96 51 25 | @ contact@benoitssystemes.com