



MINOTOR 3

MINI MINOTOR 3 / MINOTOR 3 XL

LIGHT DRIVE MINI 3, LIGHT DRIVE 3 AND LIGHT DRIVE 3 XL

NOTICE D'UTILISATION




Septembre 2025



1 METTEZ EN PLACE LA MOTORISATION


Votre fauteuil a été équipé de *profilés et de crochets* qui permettront la mise en place très rapide de votre motorisation.

1. Actionnez les freins du fauteuil pour faciliter le montage.
2. Soulevez la motorisation par la poignée supérieure et posez les axes sur les crochets.
3. Relâchez la poignée et vérifiez que la motorisation est verrouillée sur les crochets.

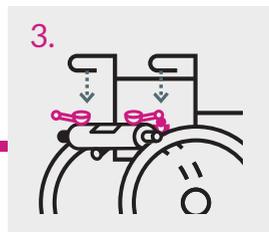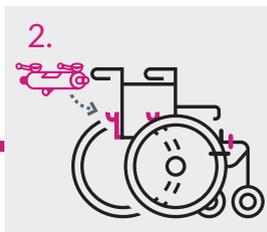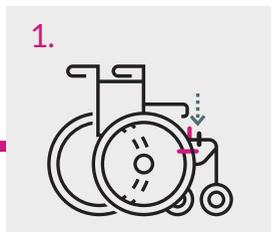

2 TOURNEZ LES MANETTES POUR EMBRAYER


1. Étirez les manettes télescopiques pour démultiplier votre force.
2. Embrayez les deux côtés.

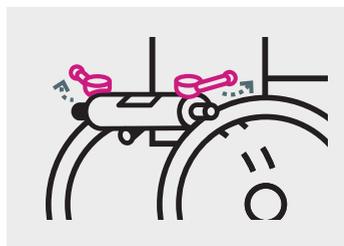

Vous pouvez débrayer la motorisation et retrouver ainsi l'usage classique du fauteuil roulant manuel.

PASSEZ DU MODE MOTORISÉ AU MODE MANUEL

Position des manettes débrayées

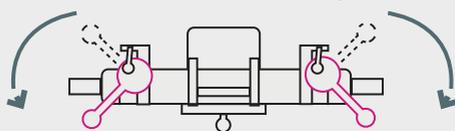

Manettes télescopiques

- ① Étirez les poignées.
- ② Tournez les poignées jusqu'à la butée.

3 POSITIONNEZ LE BOÎTIER DE COMMANDE

Une **glissière** a été installée à l'avant du fauteuil ou sous l'accoudoir pour la mise en place du boîtier de commande.


1. Insérez la rallonge dans la glissière.
2. Faites cheminer le cordon à l'intérieur de l'assise du fauteuil afin d'éviter tout frottement sur la roue.



Pour escamoter le boîtier de commande, appuyez ou tirez sur le bouton de la glissière. Soulevez-le jusqu'à la butée pour le mettre à sa position initiale.

4 METTEZ EN PLACE LA BATTERIE


1. Insérez la batterie dans les glissières sous la motorisation.
2. Poussez fermement la batterie jusqu'au clic.

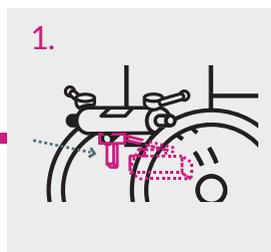

5 POSITIONNEZ L'ANTI-BASCULE

1. Clipsez l'anti-bascule dans la poignée arrière.
2. Vérifiez le sens de montage (roulette dirigée vers le bas) et le verrouillage du pion de maintien.

Votre motorisation est prête à être utilisée !

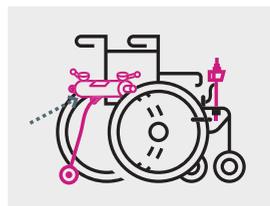

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

Pour assurer une bonne utilisation et longévité de votre motorisation, voici quelques conseils à suivre :



Chargez votre batterie après chaque journée d'utilisation.

ⓘ La batterie doit être allumée pour charger*.

*Pour plus de détails, se référer au manuel d'utilisation de la batterie.



Gonflez régulièrement vos pneus. La pression d'utilisation doit être comprise entre 6 et 8 bars.





Nettoyez régulièrement les galets de la motorisation.

Suivez **notre chaîne Youtube** pour recevoir régulièrement des conseils.

6 RETIREZ LA MOTORISATION


1. Actionnez les freins sur le fauteuil.
2. Laissez les poignées embrayées sur le fauteuil.
3. Retirez l'anti-basculade.
4. Saisissez la poignée de la batterie, puis tirez vers l'arrière.
5. Retirez le boîtier de commande et placez-le dans la glissière de stockage sous la motorisation.
6. Débrayez la motorisation en tournant les manettes.
7. Soulevez la motorisation à l'aide de la poignée supérieure.

 La motorisation ne peut être retirée qu'en relevant la poignée supérieure.

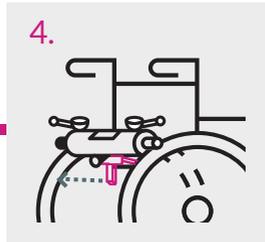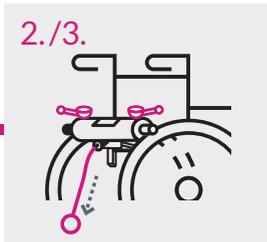


7 RECHARGEZ LA BATTERIE

Si la batterie est sur le fauteuil, connectez la partie cylindrique du chargeur sous le joystick.

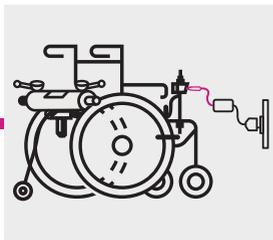

Si la batterie est retirée du fauteuil, branchez le chargeur sur le connecteur rouge.

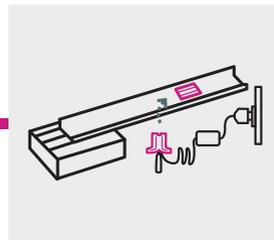

**CARNET
D'ENTRETIEN
ET MANUEL
D'UTILISATION
BATTERIE À
CONSULTER**

pour les consignes de
conduite, de sécurité
et d'entretien

**Branchez ensuite le chargeur sur le secteur.
Déconnectez une fois la charge complète.**

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. En sa qualité de fabricant, BENOIT SYSTEMES déclare que ce produit est un dispositif de classe I, conforme aux exigences de sécurité et de performance du Règlement européen 2017/745/CEE relatif aux dispositifs médicaux.

📍 7 Rue du Pont, 21450 Billy-lès-Chanceaux FRANCE
☎ (+33) 3 80 96 51 25 | @ contact@benoitsystemes.com

WWW.BENOISYSTEMES.COM